



# eva EquiPhaco™

UNE GAMME COMPLÈTE D'EMBOUTS PHACO HAUTE PERFORMANCE

Conçue pour une parfaite stabilité de la chambre antérieure,  
et une efficacité accrue des ultrasons.

# UNE GAMME COMPLÈTE D'EMBOUTS PHACO HAUTE PERFORMANCE OPTIMISÉS POUR UNE UTILISATION AVEC LA PLATEFORME PHACO VITRECTOMIE EVA

2 types d'embouts



EMBOUT  
ÉVASÉ DROIT



EMBOUT  
ÉVASÉ ANGULÉ

Deux angulations d'embout pour différentes techniques




30°




45°


4 gammes d'embouts

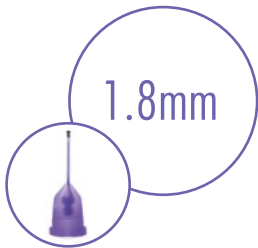


1.8mm

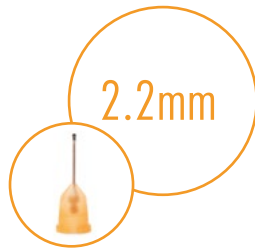

2.2mm

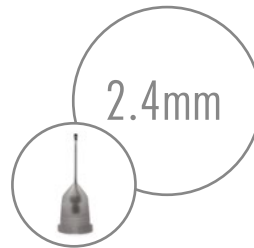

2.4mm

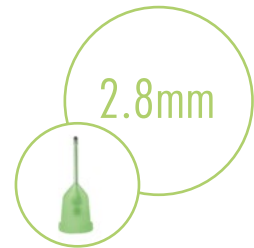

2.8mm

Usage unique



Réutilisables



- EVA avec ses deux modes fluidiques est conçue pour une performance phaco optimale
- La pièce à main phaco «Sure Touch» pour une manipulation plus facile et une prise en main sûre pendant la chirurgie





## STABILITÉ DE LA CHAMBRE ANTÉRIEURE

- Manchons améliorés afin de donner un maximum d'efficacité d'infusion, résultant d'une adéquation parfaite entre l'irrigation et l'aspiration.
  - Les ouïes d'irrigation du manchon ont été redessinées afin de maximiser la surface d'irrigation.
  - Le positionnement du manchon a été optimisé afin de limiter les fuites en le plaçant au plus près de l'embout.
  - La rigidité du manchon a été accrue afin de réduire la résistance au débit d'irrigation.
- Un flux d'aspiration constant grâce un embout flared afin de réduire les obstructions et les phénomènes de collapsus (effet de surge).

## AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ DES ULTRASONS ET DU TEMPS EFFECTIF DE PHACO

Diamètre de l'embout augmenté:

- Pour augmenter la force de maintien avec un embout flared.
- Pour améliorer les effets d'émulsification et réduire la puissance délivrée.



## POSITIONNEMENT DU MANCHON FACILITÉ



- Un indicateur de positionnement du manchon permet un alignement parfait de l'aiguille et du manchon.
- La rigidité améliorée du manchon permet un meilleur positionnement.

# EMBOUT ÉVASÉ DROIT

## Set à usage unique - Stérile (boîte de 6)

Code produit	Nom du produit	Taille d'incision	Biseau
8430.18SF1	MICS 1.8 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 30°	1.8 à 2.2mm	30°
8445.18SF1	MICS 1.8 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 45°	1.8 à 2.2mm	45°
8430.22SF1	2.2 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 30°	2.2 à 2.4mm	30°
8445.22SF1	2.2 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 45°	2.2 à 2.4mm	45°
8430.24SF1	2.4 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 30°	2.4 à 2.6mm	30°
8445.24SF1	2.4 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 45°	2.4 à 2.6mm	45°
8430.28SF1	2.8 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 30°	2.8 à 3.0mm	30°
8445.28SF1	2.8 mm set phaco à usage unique avec aiguille droite évasée à 45°	2.8 à 3.0mm	45°

## Set réutilisable – limité à 20 stérilisations (boîte de 6)

Code produit	Nom du produit	Taille d'incision	Biseau
3430.18SF1	MICS 1.8 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à 30°	1.8 à 2.2mm	30°
3445.18SF1	MICS 1.8 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à 45°	1.8 à 2.2mm	45°
3430.22SF1	2.2 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à 30°	2.2 à 2.4mm	30°
3445.22SF1	2.2 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à 45°	2.2 à 2.4mm	45°
3430.24SF1	2.4 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à 30°	2.4 à 2.6mm	30°
3445.24SF1	2.4 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à 45°	2.4 à 2.6mm	45°
3430.28SF1	2.8 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à 30°	2.8 à 3.0mm	30°
3445.28SF1	2.8 mm set phaco réutilisable avec aiguille droite évasée à 45°	2.8 à 3.0mm	45°

# EMBOUT ÉVASÉ ANGULÉ

## Set à usage unique - Stérile (boîte de 6)

Code produit	Nom du produit	Taille d'incision	Biseau
8430.18AF1	MICS 1.8 mm set phaco à usage unique avec embout 30° évasé angulé	1.8 à 2.2mm	30°
8445.18AF1	MICS 1.8 mm set phaco à usage unique avec embout 45° évasé angulé	1.8 à 2.2mm	45°
8430.22AF1	2.2 mm set phaco à usage unique avec embout 30° évasé angulé	2.2 à 2.4mm	30°
8445.22AF1	2.2 mm set phaco à usage unique avec embout 45° évasé angulé	2.2 à 2.4mm	45°
8430.24AF1	2.4 mm set phaco à usage unique avec embout 30° évasé angulé	2.4 à 2.6mm	30°
8445.24AF1	2.4 mm set phaco à usage unique avec embout 45° évasé angulé	2.4 à 2.6mm	45°
8430.28AF1	2.8 mm set phaco à usage unique avec embout 30° évasé angulé	2.8 à 3.0mm	30°
8445.28AF1	2.8 mm set phaco à usage unique avec embout 45° évasé angulé	2.8 à 3.0mm	45°

## Set réutilisable – limité à 20 stérilisations (boîte de 6)

Code produit	Nom du produit	Taille d'incision	Biseau
3430.18AF1	MICS 1.8 mm set phaco réutilisable avec embout 30° évasé angulé	1.8 à 2.2mm	30°
3445.18AF1	MICS 1.8 mm set phaco réutilisable avec embout 45° évasé angulé	1.8 à 2.2mm	45°
3430.22AF1	2.2 mm set phaco réutilisable avec embout 30° évasé angulé	2.2 à 2.4mm	30°
3445.22AF1	2.2 mm set phaco réutilisable avec embout 45° évasé angulé	2.2 à 2.4mm	45°
3430.24AF1	2.4 mm set phaco réutilisable avec embout 30° évasé angulé	2.4 à 2.6mm	30°
3445.24AF1	2.4 mm set phaco réutilisable avec embout 45° évasé angulé	2.4 à 2.6mm	45°
3430.28AF1	2.8 mm set phaco réutilisable avec embout 30° évasé angulé	2.8 à 3.0mm	30°
3445.28AF1	2.8 mm set phaco réutilisable avec embout 45° évasé angulé	2.8 à 3.0mm	45°